




SYSTEM- ÜBERSICHT

#1 DIGITAL IMPLANT COMPANY

PHILOSOPHIE

TRI® Dental Implants ist ein innovativer Anbieter für digitale Produktlösungen in der oralen Implantologie aus der Schweiz. Lernen Sie uns auf den folgenden Seiten kennen!

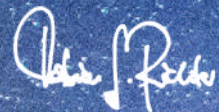

Gründer und Verwaltungsratspräsident
Tobias S. Richter



SCHWEIZER QUALITÄT

Hochwertige Produkte
mit mehr als 25 Jahren
Weltmarkterfahrung



LEISTUNG

4 Goldstandards
für optimale Ergebnisse
in der Praxis



EINFACHHEIT

Ein einzigartiges Handling
in einer intelligenten
Portfoliostruktur mit 50%
weniger Komponenten



THINK DIGITAL

TRI+ Digital Solutions für
einen einfachen, schnellen
und kosteneffektiven
digitalen Workflow




FAIRER PREIS

Bis zu 50% günstiger
im Preis durch ein
schlankes, effizientes
Geschäftsmodell

ERFOLGSFAKTOREN DES TRI® DENTAL IMPLANT SYSTEM.

TRI® PERFORMANCE CONCEPT (Seite 5-11)

Das TRI® Performance Concept integriert 4 Goldstandards, um die Anwendung des Implantats so EINFACH und LEISTUNGSFÄHIG wie möglich zu gestalten und zugleich natürlich ästhetische Ergebnisse am Patienten zu ermöglichen.

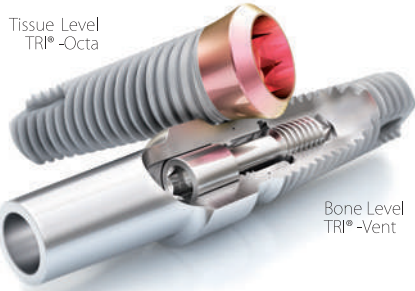

VERPACKUNGSKONZEPT (Seite 11)

Das kontaktlose Verpackungskonzept TRI® Pod ermöglicht es, das Implantat mit dem chirurgischen Instrument direkt und in einem einzigen Schritt zu greifen und garantiert zugleich die höchste Reinheit der TRI® SBA Oberfläche. Eine wahre Designinnovation, die Ihren Behandlungsablauf beschleunigt und optimiert.




IMPLANTAT LINIEN (Seite 14)

Die Technologie des TRI® Performance Concept wurde auf die Bone Level (TRI®-Narrow, TRI®-Vent) und Tissue Level Implantate (TRI®-Octa) angewandt und garantiert somit eine optimale ästhetische Abdeckung im anterioren und posterioren Bereich.




TRI® DIGITAL (Seite 12-13)

TRI®+ Digital Solutions garantiert eine universelle offene Implantatschnittstelle zu führenden Technologiepartnern in der digitalen Implantologie. Zusammen mit einem schlanken und intelligenten Implantatsystem ermöglicht TRI®+ Digital grenzenlose Behandlungsoptionen von einfach bis komplex: 3D Planung, geführter Chirurgie, CAD-Abutments, CAD/CAM verschraubte und zementierte Restaurationen oder moderner Behandlungen wie All-on-TRI® Verfahren.

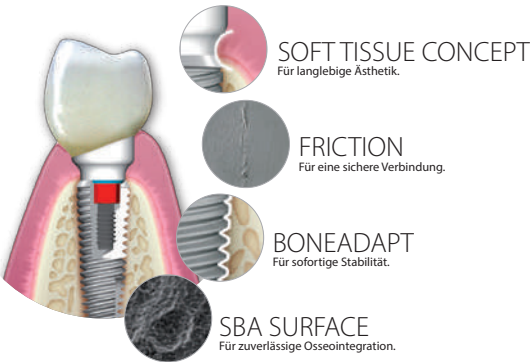


TRI® PERFORMANCE CONCEPT 4 GOLDSTANDARDS IN EINEM SYSTEM.

Das TRI® Dental Implant System integriert vier essenzielle Designbausteine, die im TRI® Performance Concept zusammengefasst sind. Jeder Baustein garantiert maximale Leistung und nachhaltige Qualität für die Behandlung des Patienten.

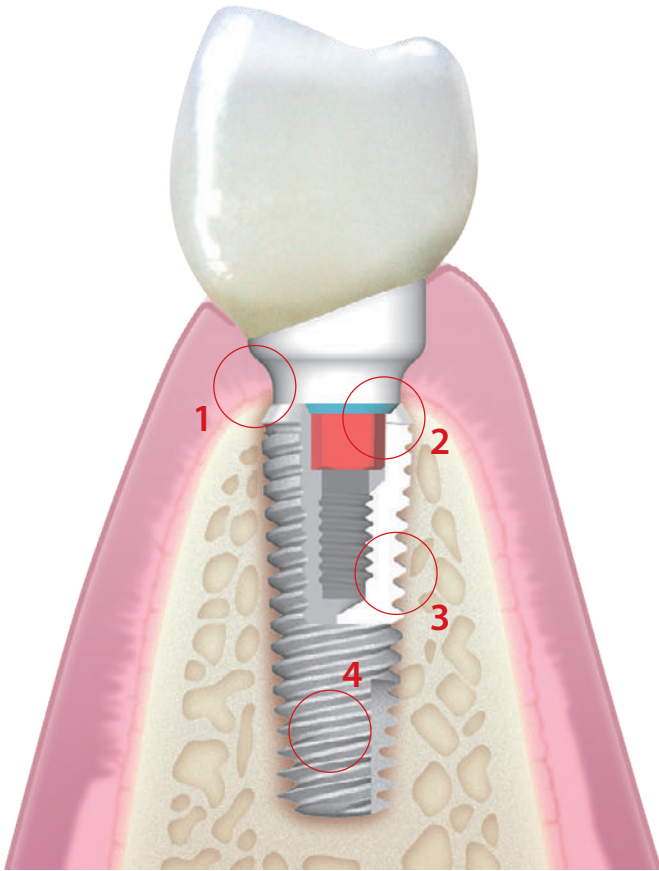


SOFT TISSUE CONCEPT (Seite 6-7)

- Integriertes Platform Switch Konzept zum Erhalt des krestalen Knochens
- Konsistentes Weichgewebemanagement in allen Prothetikkomponenten
- Homogener Übergang an der Implantat-Abutment Schnittstelle zur Vermeidung von "Dirt Pockets"

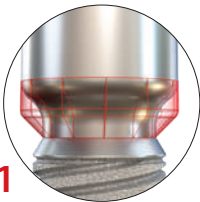


FRICTION (Seite 8)

- Formdichte Presspassung für maximale Abutment Stabilität
- Vermeidung von Mikrobewegungen zwischen Implantat und Abutment
- Interne Verbindung für die geführte Abutmentpositionierung

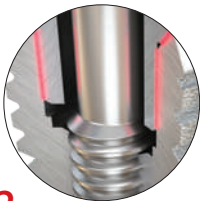


BONEADAPT (Seite 9)

- Hohe Primärstabilität durch konischen Implantatkörper mit selbstschneidendem Gewindedesign
- Biomechanische Knochenadaptation mit maximalem Knochen-Implantat Kontakt
- Optimierter Schutz der Kortikalis durch abgeflachtes Makrogewinde

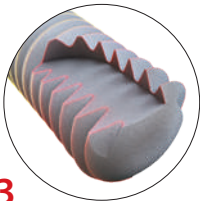


SBA* SURFACE (Seite 10-11)

- Schnelle und zuverlässige Osseointegration
- Industrie Goldstandard für sichere Osseointegration seit mehr als 20 Jahren
- Meisterforschte Oberflächentechnologie der Welt

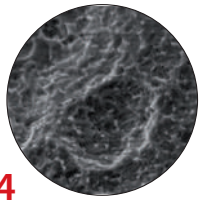

*SBA: Sand-Blasted, large-grit, double Acid-etched

TRI® SOFT TISSUE CONCEPT FÜR LANGLEBIGE ÄSTHETIK.

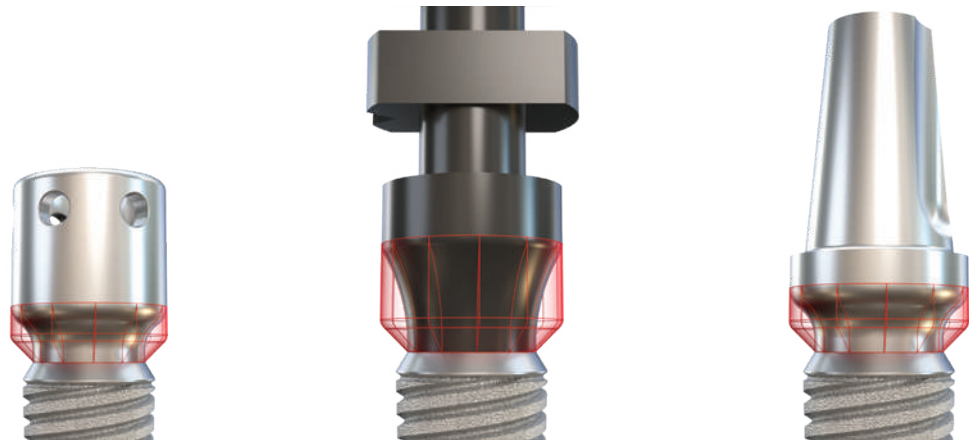

GINGIVA-FORMER

ABFORMPFOSTEN & SCANKÖRPER

ABUTMENT


Das Weichgewebs-Design des TRI® Dental Implant System ist einzigartig und innovativ zugleich. Alle prothetischen Komponenten von Einheil- und Abformpfosten bis zum finalen Abutment weisen ein einheitliches aufeinander abgestimmtes Austrittsprofil auf. Das Design ermöglicht eine beständige und dichte Abdeckung der kritischen Implantat- Abutment-Verbindung durch das Weichgewebe.



KONSISTENTES EMERGENZPROFIL

Das Implantat-Abutment Weichgewebs-Design ist durch einen sanften Übergang gekennzeichnet und hinterlässt trotz des ausgedehnten Plattform-Switching-Konzepts keinerlei "Dirt Pockets". So kann das Weichgewebe die kritische Implantat-Abutment- Verbindungsstelle schonend abdecken.

TRI® PROTHETIK EINE PROTHETISCHE VERBINDUNG.

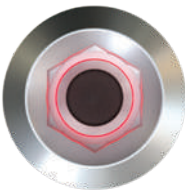

MAXIMALE PROTHETISCHE FLEXIBILITÄT MIT NUR EINER VERBINDUNG

Mit lediglich einer prothetischen Verbindung je Implantatlinie reduziert sich die Anzahl der prothetischen Komponenten auf ein Minimum und vereinfacht Handling und Lagerhaltung. Wählen Sie das ideale Aufbaudesign mit dem TRI® Soft Tissue Concept, um das prothetisch gewünschte Ergebnis zu erhalten.



ABDRUCKNAHME


TRI® verfügt über revolutionäre, patentierte instrumentfreie Abdruckpfosten für offene und geschlossene Löffel-Methode: digital oder analog

HIGHLIGHTS



ALL-ON-TRI® ABUTMENT

Das 'All-on-TRI' Abutment ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Versorgung von zahnlosen Patienten mit limitiertem Knochen-angebot.

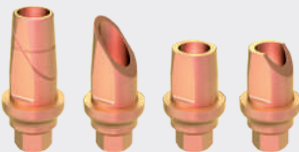

TRI®-BASE

Die neue patentierte TRI®-Base ist die erste Titan-Klebbasis, die in Länge und Abwinkelung sowohl physisch vom Zahn-techniker als auch digital in der jeweiligen CAD-Software, angepasst werden kann.

PORTFOLIO



GINGIVA FORMER

DIREKTER UND INDIREKTER ABDRUCKPFOSTEN

TEMPORÄR ABUTMENTS

GERADE ABUTMENTS

ABGEWINKELTE ABUTMENTS

ANGUSSFÄHIGE ABUTMENTS

VERSCHRAUBTE RESTAURATIONEN

TRI® RAPTOR ABUTMENTS

KUGELKOPF RESTAURATIONEN

TRI® FRICTION

FÜR EINE SICHERE VERBINDUNG.




WAHRSCHEINLICH DIE STÄRKSTE VERBINDUNG DER WELT.

TRI® FRICTION ist eine technologisch einzigartige Prothetik-Verbindung und integraler Bestandteil des TRI® Performance Concepts. Eine Fertigungstoleranz von 0.006 mm garantiert den perfekten und hochpräzisen Sitz der Prothetik mit langfristiger Sicherheit.

VORTEILE DER VERBINDUNG:

- Formdichte Presspassung für maximale Abutment-Stabilität
- Vermeidung von Mikrobewegungen zwischen Implantat und Abutment
- Keine Schraubenlockerung durch Rotationssicherung
- Verbessertes Handling durch Retention des Abutments selbst ohne Schraube

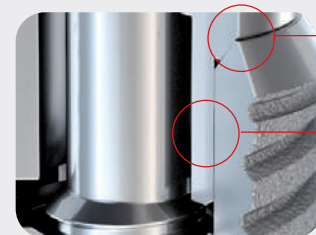

Interne konische 45 Grad Verbindung zur Eliminierung des Micro Gap

Interne Hexagon Verbindung mit TRI®-Friction für maximale rotatorische und axiale Stabilität

TRI® BONEADAPT

FÜR SOFORTIGE STABILITÄT.




PLATFORM SWITCH SCHULTER
Verlagerung der biologischen Breite, um den Erhalt des krestalen Knochens zu stützen

KRESTALES GEWINDEDESIGN
Mit abgeflachtem Trapezgewinde zum Schutz der Kortikalis

BODY GEWINDEDESIGN (60 Grad)
Für optimale Knochenkompression in der Spongiosa und maximalen Knochen-Implantatkontakt

APIKALES GEWINDEDESIGN (45 Grad)
Mit erhöhter Schneidewirkung für sofortige Primärstabilität

RUNDER APEX
Zum Schutz der Schneiderschen Membrane

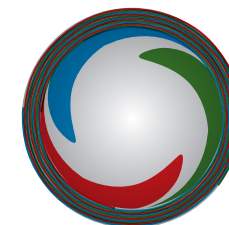

SELBSTSCHNEIDENDE DREIFACHGEWINDE

Drei voneinander unabhängige Gewinde laufen im Abstand von 120° getrennt und spiralförmig um den Implantatkörper. Sie enden in einer vertikalen krestalen Einkerbung–BoneShifting®. Das TRI Gewindedesign sorgt für eine gewebeschonende Insertion und einen hohen Grad an Stabilität, bei einem Vorschub von 1,8 mm pro Umdrehung.




TRI® SBA SURFACE

FÜR EINE ZUVERLÄSSIGE OSSEOINTEGRATION.

MASCHINIERTER IMPLANTATSCHULTER

Das Bone Level Implantat zeichnet sich durch eine 0,5 mm maschinierete Schulter im krestalen Bereich aus.

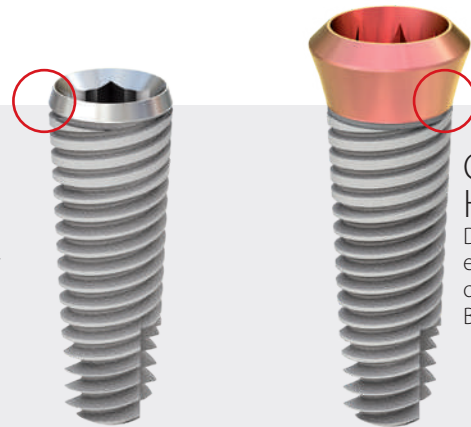


BONE LEVEL

TISSUE LEVEL

GINGIVA FARBENE HALSMANSCHETTE




Das Tissue Level Implantat zeichnet sich durch eine 1,8 mm maschinierete Halsmanschette für optimale ästhetische Ergebnisse im posterioren Bereich aus.

Die TRI® SBA (sandblasted, large grit, acid-etched) Oberfläche ist seit über 20 Jahren einer der Goldstandards in der Industrie. Die Implantatoberfläche wird unter hohem Druck mit grobkörnigem Sand abgestrahlt. Anschließend wird die Oberfläche zwei Mal mit Säure geätzt, um eine mittlere Rauigkeit zu erzielen.

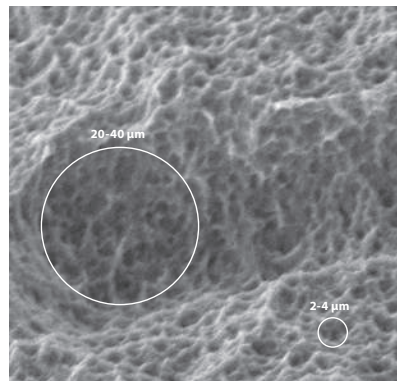

OBERFLÄCHENSTRUKTUR

Eine Makrostruktur von 20-40 µm und eine Mikrostruktur von 2-4 µm bieten die ideale Basis für eine exzellente Ossointegration. Dies wurde durch zahlreiche klinische Studien dieses Oberflächentyps bestätigt.

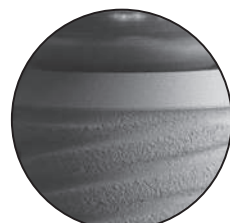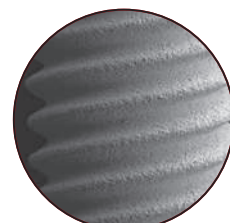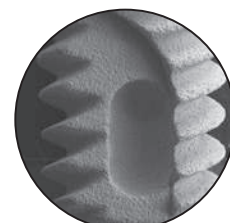

TRI® POD

HANDLING. NEU DURCHDACHT.



WER ES BERÜHRT, WIRD ES LIEBEN.

Das revolutionäre TRI® Pod Konzept setzt neue Maßstäbe in der Implantologie – 100% entwickelt und produziert in der Schweiz. Das kontaktlose Verpackungskonzept ermöglicht es, das Implantat mit dem chirurgischen Instrument direkt und in einem einzigen Schritt zu greifen und garantiert zugleich die höchste Reinheit der TRI® SBA Oberfläche. Eine wahre Designinnovation, die Ihren Behandlungsablauf beschleunigt und optimiert. **Wer es berührt, wird es lieben!**

3 Optionen für die Implantatinserterion



Ratsche



Winkelstück




Von Hand

TRI[®]+ DIGITAL

DIGITAL WORKFLOW.

TRI Dental Implants setzt mit **TRI+ Digital** neue Standards als universelle Implantatschnittstelle zu führenden Technologiepartnern in der digitalen Implantologie. Zusammen mit einem schlanken Implantatsystem ermöglicht **TRI+ Digital** grenzenlose Behandlungsoptionen von einfach bis komplex:

- + 3D-Planung & geführte Chirurgie
- + Individualisierte CAD Aufbauten
- + CAD/CAM zementierte Kronen und Brücken
- + CAD/CAM verschraubte Stege und Brücken

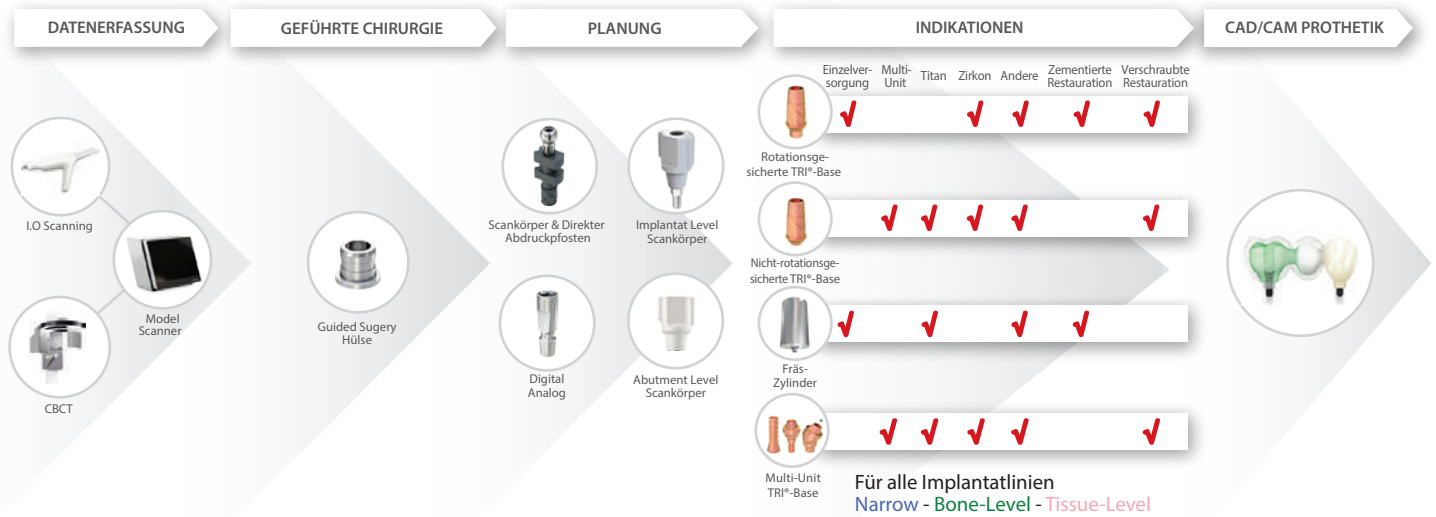


* nur für Bone-Level Implantate verfügbar

DIGITALE BEHANDLUNGSOPTIONEN



matrix[®]

DAS ERSTE DIGITALE IMPLANTAT DER WELT.

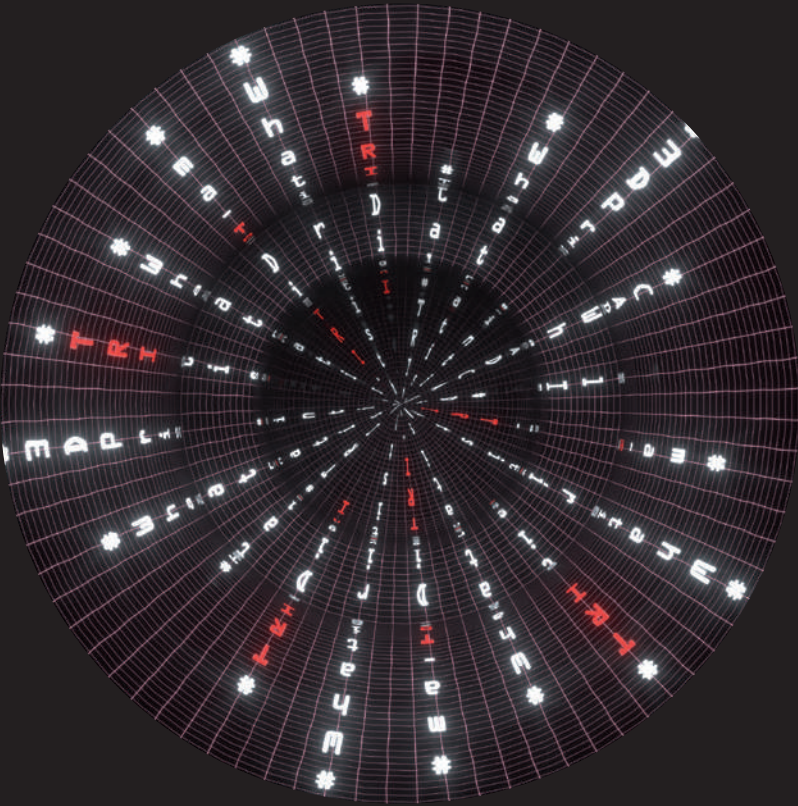

DIREKT VERSORGBAR. OHNE ABUTMENT.

Die **matrix[®]** ist die erste Implantatverbindung, die speziell für die neuen digitalen Fertigungstechnologien wie CAD/CAM Fräsmaschinen oder 3D-Drucker entwickelt wurde. Dieses einzigartige Konzept ermöglicht die Planung der Prothetik direkt auf dem Implantat ohne Verwendung eines Abutments. Dank der unbegrenzten Designflexibilität können Restaurationen von verschraubten, vollanatomischen CAD/CAM Einzelversorgungen bis zu mehrteiligen Stegen und Brücken direkt auf dem Implantat geplant werden. Maximale Winkelung- und Indikationsfreiheit sowie die Möglichkeit das Weichgewebemanagement digital zu planen, garantieren Langlebigkeit und einzigartige ästhetische Ergebnisse.

Erfahren Sie als erster mehr über die **matrix[®]**: tri.swiss/digital

TRI® IMPLANTAT PORTFOLIO

1 KIT, 3 OPTIONEN.

Das TRI® Dental Implant System setzt sich aus 3 Implantatlinien zusammen. Die Besonderheit des Systems ist, dass alle Implantatlinien mit nur einem Chirurgieset gesetzt werden können. Einfach in Perfektion!



TRI®-Narrow

Ideal bei limitiertem horizontalen Knochenangebot.

Ø 3.2 mm

3.3 mm

TRI®-Vent

Das Bone Level Implantat für alle Indikationen.

Ø 3.5 mm

3.75 mm 4.1 mm 4.7 mm

TRI®-Octa

Das Tissue Level Implantat für ästhetische Ergebnisse im Seitenzahnbereich.

Ø 4.8 mm

3.75 mm 4.1 mm 4.7 mm

DURCHMESSER & LÄNGEN

	Ø 3.3 mm	Ø 3.75 mm	Ø 4.1 mm	Ø 4.7 mm
L 6.5 mm				
L 8 mm				
L 10 mm				
L 11.5 mm	(L 11 mm)			
L 13 mm				
L 16 mm				

TRI® SOLUTIONS

SOFORTSTABILITÄT.



SOFORTSTABILITÄT. STABIL WIE EIN FELS.

Mit der innovativen TRI® BoneAdapt Technologie bietet TRI® ein intelligentes und aggressives Implantatdesign für eine optimale Primärstabilität*, insbesondere für Sofortversorgungen. Dies ermöglicht moderne Behandlungsoptionen wie All-on-TRI® mit erheblichem Mehrwert für Patienten sowie eine höhere Lebensqualität. Erfahren Sie mehr über unsere TRI® Solutions auf tri.swiss/solutions.

*Based on in vitro bench testing in collaboration with University Center for Dental Medicine, Basel.

CHOOSE YOUR SOLUTION



TRI
dental implants

TRI Dental Implants Int. AG
Switzerland
Infoline: 00800 3313 3313
www.tri.swiss

Werden Sie TRI® Follower



Alle in diesem Dokument verwendeten Logos und Marken in diesem Dokument sind, soweit nicht anders vermerkt im Besitz der **TRI® Dental Implants Int. AG.** | 2019-12 | TRI® System Overview DE 2019-12/01



CE 0297

