

Schnelles und sicheres Abformsystem

Instrumentfreies Konzept


Der Schweizer Implantat-Hersteller TRI Dental Implants treibt die „ultimative Einfachheit“ in der Implantologie weiter voran und lanciert nach seinem Handlingkonzept TRI Pod ein patentiertes und instrumentenfreies Abformsystem inklusive Abutment, TRI 2in1 Impression Abutment.

TRI baut sein Produktportfolio mit dem innovativen TRI 2in1 Impression Abutment aus. Das patentierte instrumentenfreie und einfache Handlingkonzept ermöglicht eine schnelle und sichere Abdrucknahme mittels geschlossener Löffel-Methode. Im Anschluss kann der Abdruckpfosten als finales Abutment verwendet werden.

So einfach funktioniert's: Das TRI 2in1 wird mit dem integrierten Handgriff ins Implantat eingeschraubt und bei definiertem Drehmoment an der Sollbruchstelle abgedreht. Anschliessend kann eine sichere und präzise Abdrucknahme

vorgenommen werden. Das TRI 2in1 kann jetzt einfach mit dem vorher abgedrehten Handgriff gelöst und herausgenommen werden. Danach wird das TRI 2in1 mit dem Implantatanalog verschraubt, im Abdruck repositioniert, um das Mastermodell herzustellen. Die Abdruckschraube wird mit der Okklusalschraube ausgetauscht und das TRI 2in1 ist jetzt ein finales Contour Abutment mit konischem Profil und definierter Zementgrenze.

Wie bei jeder Innovation von TRI ist es immer das Ziel, den Behandlungsablauf maximal zu vereinfachen und gleichzeitig die Leistung des Produktes in der Hand des Behandlers nochmals zu verbessern. ■

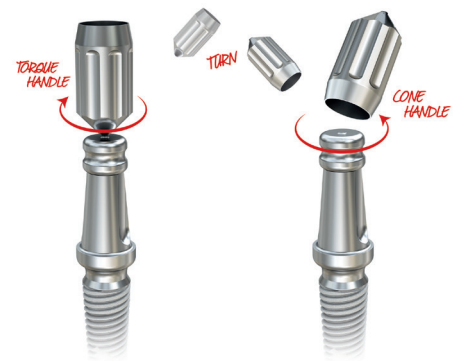

TRI 2in1 Impression Abutment

Weitere Informationen:

www.tri.swiss